



クラプロックス 歯ブラシ

普通の歯ブラシとは違う！ 必読！“クラプロックスの正しい使い方”

理想的な歯みがきのために開発されたクラプロックスのブラシ毛


「クーレン®繊維」は、一般的な歯ブラシとは使い方が違います。

「クーレン®繊維」による歯みがきの効果を最大限に得るため、正しい使い方を身に付けましょう！

⚠️ クラプロックスの歯ブラシに力はいりません。力の入れすぎに注意してご使用ください。

1 PEN GLIP ペングリップ(鉛筆持ち)で優しく持つ


歯ブラシは、軽くペンを持つように握ってください。このペングリップにより、自然な強さで効果的なブラッシングができます。

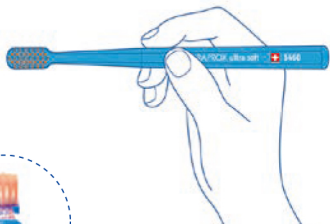

八角形のハンドルは、ペングリップで持つことで歯みがきに最適な45°で当たるようにできています。


2 45° DEGREE ANGLE 歯と歯肉に半分ずつ、角度45°で当てる

歯みがきは特に、歯と歯の間、歯と歯肉の間をキレイにするために行います。そのためには、ブラシの半分を歯に、もう半分を歯肉に、45°で当ててみがきましょう！

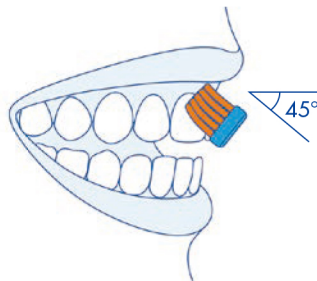


3 SOFT TOUCH ブラシは軽く当てる

みがくときは、ブラシの面を歯に軽く当てるイメージです。力をかけすぎてしまうと下図(NG)のように毛先が広がり、プラークをきれいに除去できません。

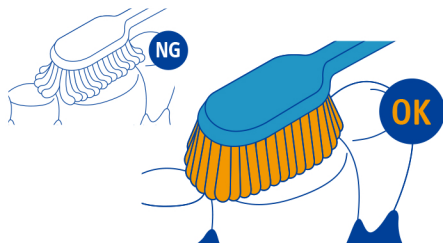

4 ROUND AND ROUND 軽いタッチでくるくる回すようにみがく

実際にみがいてみましょう。コツは、くるくると円を描くようにみがくことです。「クーレン®繊維」は、歯肉にやさしく安心してみがくことができます。

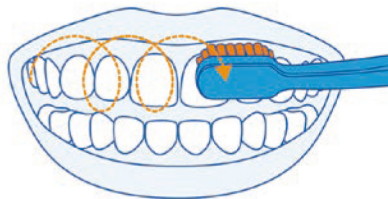




クラプロックス 歯ブラシ

これでツルツルの輝く歯に！ 必読！“クラプロックスの正しいみがき方”

正しいみがき方をマスターすると、歯がきれいになるだけでなく、
プラーク(細菌)を取り除き、健康的な歯肉を保つことができます。
みがき方のコツと丁寧にみがく習慣を身に付け、ツルツルの輝く歯を手に入れましょう！


① まずはみがく順番を決めましょう！毎日決まった順番にみがいていると、みがき残しが少なくなります。

例えば、以下の順番でみがいてみましょう。
時間をかけてきちんと全ての歯をみがくことを意識しましょう。

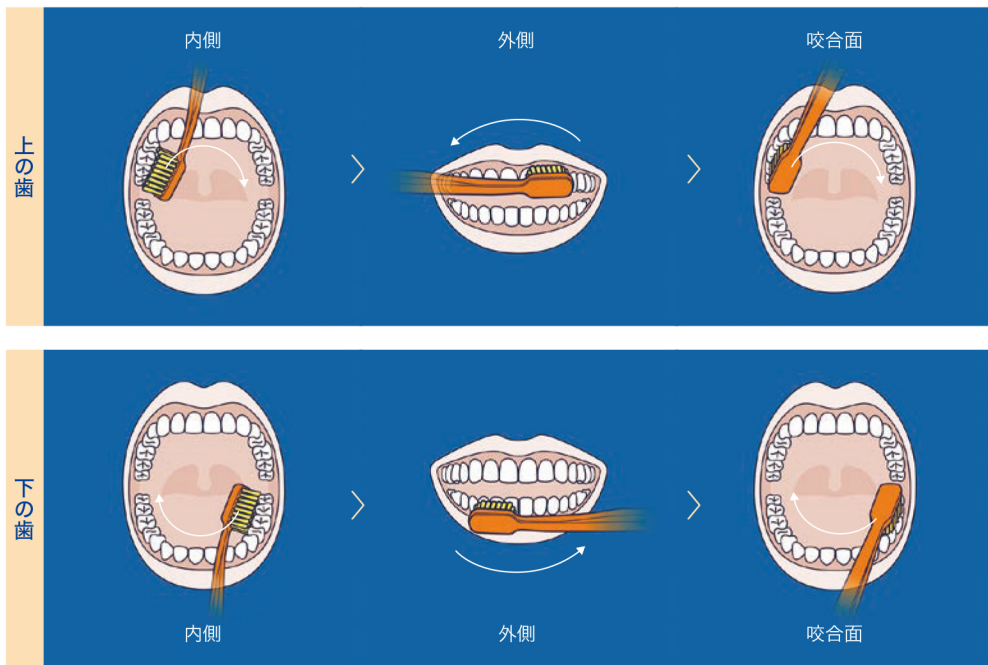

みがき方カンタン動画や
キャップの取り扱い方法・
正しいお手入れ方法の動画はこちら！

curaprox.shop/use/

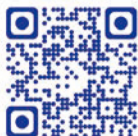

curaden

better health for you

株式会社クラデンジャパン